

原告物件目録

高圧電位治療器


商品名 コスモドクター V-9000

医療用具承認番号 O-6B-第〇八四四号

型式認可番号  九一―二七八七五号

(添付 本体装置図面記載のとおり)

本体装置

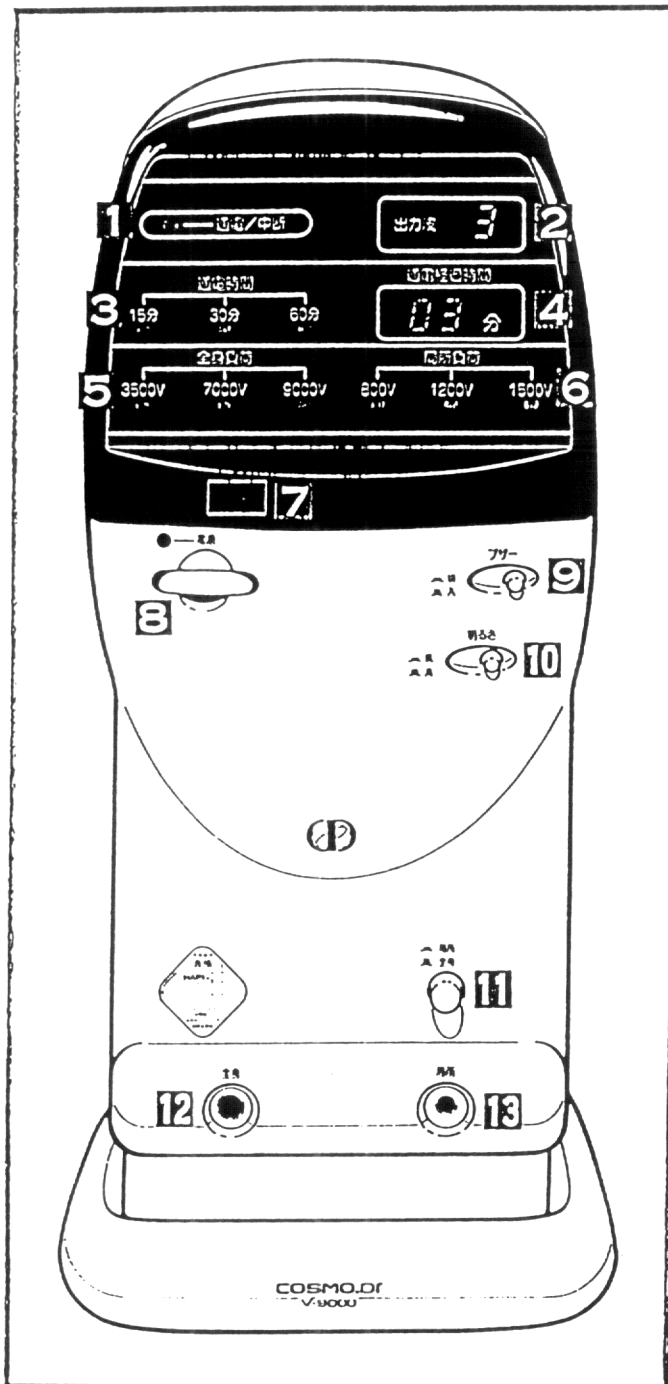

1 通電／中断表示 (リモコン使用)

通電中にはランプが点灯し、中断した時は点滅します。

2 出力波表示 (リモコン使用)

1・2・3の3種類の出力波を表示します。

3 時間設定表示 (リモコン使用)

選択した、15分、30分、60分の時間の下にランプが点灯します。

4 通電経過時間表示

経過時間が1分ごとに表示されます。
中断した時にはランプが点滅します。

5 全身負荷出力電圧表示 (リモコン使用)

選択した、3500V、7000V、9000Vの電圧の下にランプが点灯します。

6 局所負荷出力電圧表示

選択した、800V、1200V、3500Vの電圧の下にランプが点灯します。

7 リモートセンサー

リモコンの発信の受信をします。(直線で5メートル以内です)

8 主電源スイッチ

押すと左上にランプが点灯します。
再度押すとストップします。

9 ブザースイッチ

▲と出たままだと入力操作の際にビツというブザー音が鳴ります。
■と押すと音が消えます。

10 表示画面の明るさ表示スイッチ

▲と出たままだと明るく、■と押すと暗くなります。

11 全身、局所負荷切換スイッチ

▲と出てる場合は全身用、■と押した場合は局所用です。

12 全身高圧出力口

高圧コードを接続します。

13 局所高圧出力口

電子ローラーのコードを接続します。

被告物件目録

電位治療器

商品名 シェンペクス

FA9000


医療用具承認番号 ○六B―第〇八四四号

型式認可番号

▽ 九――二七八七五号

(添付 本体装置図面のとおり)

本体装置

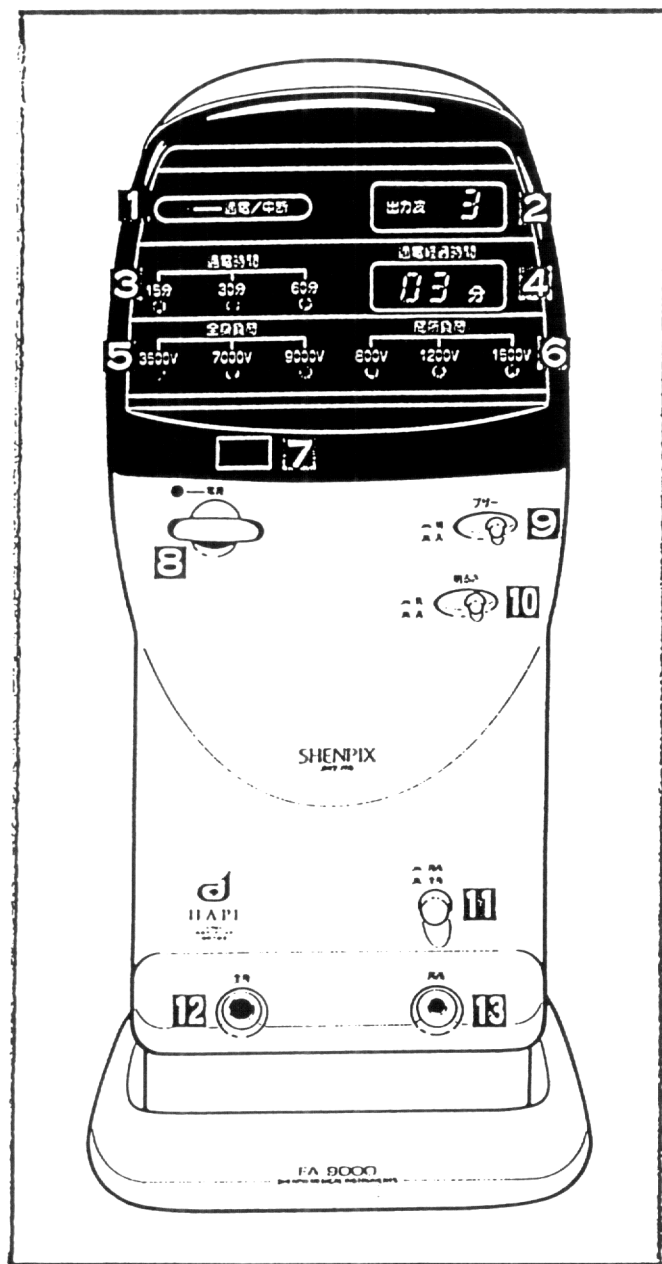

1 通電／中断表示（リモコン使用）

通電中にはランプが点灯し、中断した時は点滅します。

2 出力波表示（リモコン使用）

1・2・3の3種類の出力波を表示します。

3 時間設定表示（リモコン使用）

選択した、15分、30分、60分の時間の下にランプが点灯します。

4 通電経過時間表示

経過時間が1分ごとに表示されます。
中断した時にはランプが点滅します。

5 全身負荷出力電圧表示（リモコン使用）

選択した、3500V、7000V、9000Vの電圧の下にランプが点灯します。

6 局所負荷出力電圧表示（リモコン使用）

選択した、800V、1200V、1500Vの電圧の下にランプが点灯します。

7 リモートセンサー

リモコンの発信の受信をします。（直線で5メートル以内です）

8 主電源スイッチ

押すと左上にランプが点灯します。
再度押すとストップします。

9 ブザースイッチ

▲と出たままだと入力操作時及び通電終了時にピーピーというブザー音が鳴ります。
■と押すと通電終了時のブザー音が消えます。

10 表示画面の明るさ表示スイッチ

▲と出たままだと明るく、■と押すと暗くなります。

11 全身、局所負荷切換スイッチ

▲と出てる場合は全身用、■と押した場合は局所用です。

12 全身高圧出力口

高圧コードを接続します。

13 局所高圧出力口

電子ローラーのコードを接続します。